

***ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЦЕНТРИФУГА С
ВЫРЕЗНЫМ НОЖОМ
СТАНДАРТ GMP***

**Для применения в чистой химии, фармацевтической
промышленности...**






ROUSSELET ROBATEL

Вам предлагает серию центрифуг для чистой химии и фармацевтической промышленности

- Центрифуга с одной интегрированной доской
- Полное открытие передней наружной оболочки с ручным или гидравлическим закрытием
- Широкий вырезной нож простого действия
- Разгрузка фильтрованной гущи наклонным высыпным трубопроводом или шнеком
- Наполняющая трубка оптимизирует распределение и расположение суспензии внутри барабана
- Ополаскивающая трубка с распылителем
- Различные детекторные механизмы для определения высоты уровня гущи
- На выбор несколько механизмов для удаления осадка
- Несколько видов закреплений фильтрующего материала и вспомогательной сетки
- Высокое качество полированных поверхностей ($Ra < 0,8 \mu m$, высший класс возможен на заказ)
- Газонепроницаемое исполнение присоединенное к инертному газу
- Систем видеоконтроля присутствия азота или кислорода
- Простой или двойной гидравлический сифон для сепарации дефекационной жидкости и главного субстрата
- Уплотненное или взрывобезопасное исполнение электрического механизма
- Трехступенчатая система видеоконтроля вибраций
- Полное уплотнение посадки главной оси
- На выбор несколько возможностей управляющих систем, от полностью ручного обслуживания до полностью автоматических вариантов с локальными массовыми рубежами для присоединения механизма к сети потребителя
- Полная система Clean-in-place (CIP)
- Широкий диапазон конструкционных материалов и оболочек: нержавеющая сталь, сплавные материалы, оболочки Ebonite и Halar. Много видов уплотняющих метериалов



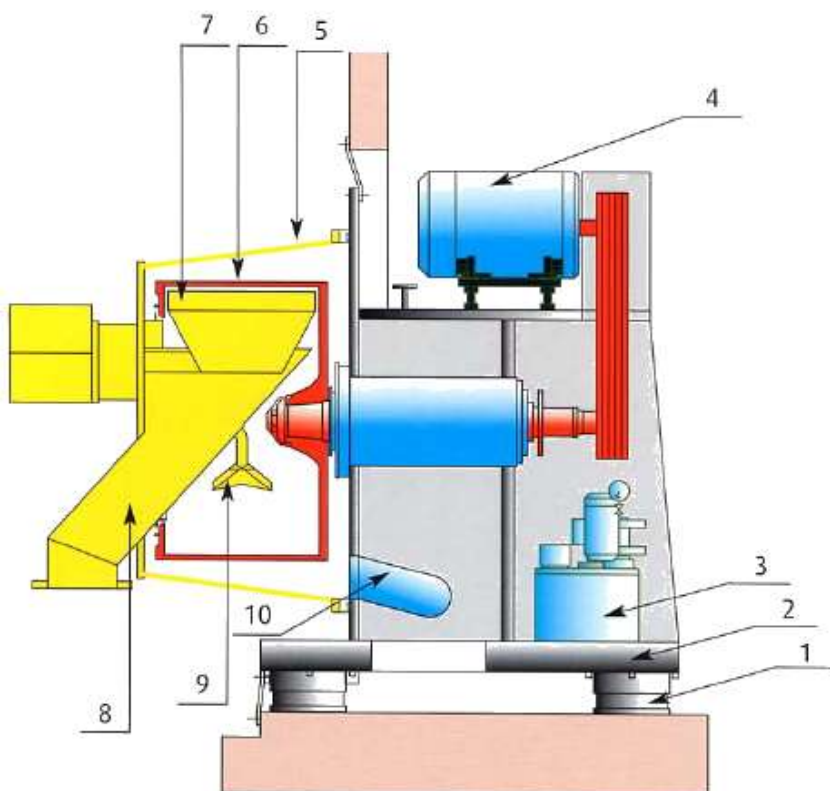

- 1 – АНТИВИБРАТОРЫ
- 2 –ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ДΟΣКА
- 3 –ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ
- 4 – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОТОР
- 5 – ПОЛНОЕ ОТКРЫТИЕ КРЫШКИ
- 6 – БАРАБАН
- 7 –ШИРОКИЙ ВЫРЕЗНОЙ НОЖ
- 8 – ТРУБОПРОВОД ОТВОДА ГУЩИ
- 9 – НАПОЛНЯЮЩАЯ ТРУБКА
- 10 – ОТВОД ФИЛЬТРАТА

ROUSSELET ROBATEL

Сейчас оперирует как одна компания, использует конкурентное преимущество сочетания профессиональности и опыта, развивающихся много лет в двух перед этим независимых компаниях.

Поэтому наши клиенты могут пользоваться нашей гибкостью и быстрым ответом сотрудников торгового и технического центра, которые Вам готовы предоставить профессиональный сервис на уровне, который ожидается от мирового ведущего авторитета в сфере сепараций.



Главные характеристики

1. Полное открытие шпоны позволяет полный доступ в целое внутреннее пространство и дает возможность для простого сервиса, инспекции, очистки и проверки
2. Высококачественная полировка поверхностей у всех смачиваемых деталей
3. Возможность инсталляции „чистой среды“, когда зона процесса отделяется от механических частей перегородкой
4. Наклонный высыпной трубопровод позволяет разгрузку гущи, легко доступный для очистки и визуального контроля
5. Загрузка суспензии по целой длине барабана гарантирует равномерную толщину гущи
6. Низкая уровень остаточной влаги, достигнутая высоким гравитационным коэффициентом
7. Возможность „беглой стирки“ в барабане заполнением крышки моющей жидкостью и вращением барабана низкой скоростью
8. Отдельная конструкция рамки позволяет гибкую установку с низкими требованиями высоты помещения и небольшой площадью; из этого следует соответствующая экономия времени при установке механизма



Техническая спецификация

ВИД	БАРАБАН							ЦЕНТРИФУГА			
	Ø (мм)	Глубина (мм)	Потреб. емкость (л)	Макс. загрузка (кг)	Фильт. площадь (м²)	Обороты (об./мин)	Гравитац. коэффициент (G)	Мощность мотора (kW)	Масса (кг)	Размеры D x Š (м)	Высота (м)
ENBL 503	500	250	24	30	0,4	2600	1890	7,5	1,7	1,25x1,05	1,45
ENBL 633	630	315	40	50	0,63	2300	1860	11	4,2	1,95x1,45	1,90
ENBL 813	810	350	94	120	0,9	2000	1810	15	5,3	1,90x1,55	1,85
ENBL 1053	1050	610	220	275	2	1550	1410	22	8,1	2,55x2,05	2,25
ENBL 1153	1150	610	330	410	2,2	1400	1260	37	10,3	2,50x2,10	2,30
ENBL 1323	1320	720	440	550	3	1235	1130	37	12,6	3,05x2,35	2,50



Франция:
ROUSSELET CENTRIFUGATION SA
 Avenue Rhin et Danube
 P.A.E de Marenton
07104 ANNONAY - FRANCE
 Tel.: +33 4 75 69 22 11
 Fax: +33 4 75 69 80
 rousselet.sa@rousselet.com
 www.rousselet.com

Великобритания:
ROUSSELET ROBATEL Ltd.
 Parkside House, 17 East Parade
HARROGATE NORTH
YORKSHIRE HG1 5LF
 +44 1 423 530 093
 +44 1 423 530 120
 sales@rousselet-robatel.co.uk

Германия:
ROUSSELET CENTRIFUGATION
 Hauptstrasse 20
D-71093 WEIL-IM-SCHONBUCH
 +49 715 762 881
 +49 715 763 232
 rousselet@t-online.de

Чешская Республика:
ROUSSELET ROBATEL ČR
 Почерница 96
108 00 ПРАГА
 +420 296 411 402
 +420 296 411 403
 info@rousselet.cz
 http://www.rousselet.cz

США:
ROBATEL Inc.
 703 West Housatonic Street
PITTSFIELD
MA 01201
 +1 413 499 4818
 +1 413 499 5648
 sales@robatel.com
 http://www.rousselet-robatel.com